

Инструкция по применению 11 сферного прожектора:

◆ Включение

Вставьте шнур в розетку, включите аппарат нажатием кнопки, которая находится сбоку прожектора. После нажатия кнопки, загорится основной экран на пульте управления.

◆ Установка температуры

С помощью ручки регулятора установите желаемую температуру - всего 7 позиций (35С – 65С).

Для увеличения температуры – поверните ручку по часовой стрелке, для уменьшения – против. Через 3 мин пользователь сможет приступить к использованию аппарата. После достижения заданной температуры, аппарат перестанет нагреваться и будет удерживать ее.

При нормальной работе прожектора будут работать световые индикаторы.

◆ Функция «Ионизатор воздуха»

Поверните ручку включения ионизатора по часовой стрелке, после чего загорится индикатор.

После включения также загорится и начнет моргать индикатор работы ионизатора.

◆ Функция «Трансформер»

Аппарат имеет возможность «трансформироваться», изгибаясь и повторяя физиологические изгибы тела. Максимальный изгиб составляет примерно 95 градусов. При использовании прожектора при заданной температуре ниже 45С можно соприкоснуться с кожей на прямую, для достижения лучшего эффекта.

◆ Выключение

Переведите черную кнопку на “0”, при этом индикатор питания погаснет. Также можно выключить прожектор, отключив шнур от питания.

◆ Автоматическое выключение

Во время использования прожектора при заданной температуре, прожектор отключится автоматически через 2 часа в случае если никакие из кнопок не будут задействованы. Также основное табло перейдет в состояние «ВЫКЛ». Данная функция помогает сберечь электроэнергию, а также установлена в целях безопасности. Возобновить работу можно, повернув одну из кнопок, при этом аппарат вернется в обычный режим.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ТРАНСФОРМЕР»




УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ

JKF-BL-11



УНИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ И ВОСТАНОВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ

• Названия частей в 11 сферном прожекторе

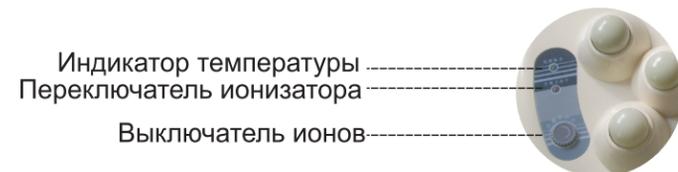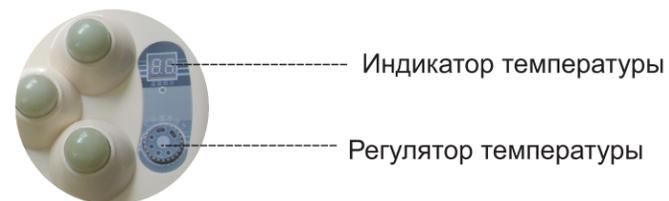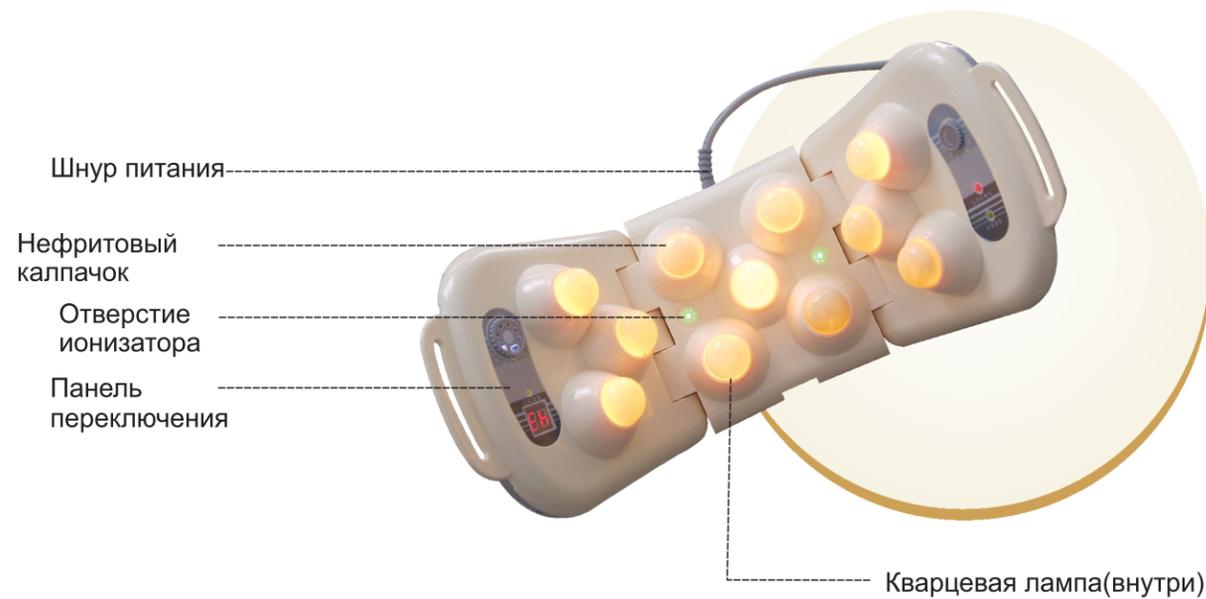

Особенности аппарата:

- ◆ В аппарате используется нефрит как источник инфракрасного тепла, которое является безопасным и эффективным;
- ◆ Встроенный ионизатор воздуха работает в совокупности с инфракрасным теплом;
- ◆ Пульт управления прост и надежен в использовании;
- ◆ Для нагрева нефрита используются кварцевые лампы - обладают высокой износостойкостью;
- ◆ 11- терапевтических колпачков отлично увеличивают эффективность лечения;
- ◆ Эластичный ремень создает удобство и комфорт в использовании аппарата;
- ◆ Двойной сенсор температуры гарантирует безопасность и комфорт;
- ◆ 7 уровней температуры (35С – 65С);
- ◆ Встроенный таймер, который отключает аппарат в случае, если он не используется 2 часа;
- ◆ Возможность подключения в розетку 220В или 110В без дополнительных преобразователей, благодаря встроенному адаптеру.

*Портативная, Расслабляющая
Комфортная Терапия*

Данный 11 сферный прожектор запатентован. Уникальный дизайн встроенный ионизатор и инфракрасный прогрев, делает этот аппарат незаменимым домашним лекарем. А также является отличным средством для расслабления.

Технический параметры	
Питание	Ac220В, 50Hz or AC110В, 60Hz
Потребляемая мощность	100W ± 10%
Диапазон температуры	35°C~65°C
Уровень температуры	7 уровней
Ионизатор	≥ 100units
Допустимая температура хранения	-10°C~35°C
Допустимое давления	≤ 85%